

**DES SUTURES
FIABLES POUR
CHAQUE
INTERVENTION**



**Au service de
l'excellence**

Pour plus
d'informations,
rendez-vous sur
notre site:
MEGADENTAL.FR

Les aiguilles chirurgicales sont fabriquées à partir d'aciers inoxydables de la plus haute qualité afin d'offrir de très bonnes performances, alliant une grande ductilité à une résistance élevée à la flexion. Un revêtement en silicone de pointe garantit une pénétration en douceur et réduit les lésions tissulaires. La forme du corps de l'aiguille est conçue pour assurer une stabilité maximale dans le porte-aiguille.

FORME DU CORPS

$\frac{1}{2}$ CERCLE




$\frac{3}{8}$ CERCLE




FORME DE LA LAME

**POINTE
EFFILÉE**

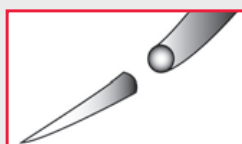

Un effilement progressif vers une aiguille à corps rond.

**COUPE
INVERSÉE**

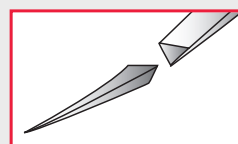

Le corps triangulaire offre un troisième tranchant sur la courbure convexe extérieure.

SUTURES RESORBABLE

PGA



Acide polyglycolique:
Suture synthétique tressée résorbable

PGA RAPID



Acide polyglycolique:
Suture synthétique tressée résorbable

SUTURES NON RESORBABLES

SOIE



Suture Tressée Non Résorbable

La SUTURE SYNTHÉTIQUE RESORBABLE TRESSÉE EN PGA (ACIDE POLYGLYCOLIQUE) est une suture chirurgicale stérile, synthétique et résorbable, composée d'acide polyglycolique. Enrobée d'un mélange de polycaprolactone et de stéarate de calcium. Tressée. Teintée en violet. La perte progressive de résistance à la traction, de masse et l'absorption finale des sutures se produisent par hydrolyse. La perte de résistance à la traction effective est d'environ 50 % 21 jours après l'implantation. L'absorption est complète entre 60 et 90 jours.


Haute résistance à la traction: Excellent soutien tissulaire.

Synthétique: Réaction tissulaire minimale.

Se décompose par hydrolyse: Taux d'absorption prévisible.

Structure tressée: Excellentes propriétés de manipulation. Grande flexibilité. Haute résistance à la traction. Excellente tenue des noeuds.

Multifilament enduit: Passage en douceur à travers les tissus avec un minimum de frottement, de résistance tissulaire et de traumatisme. Bonne fixation et ajustabilité des noeuds. Capillarité réduite.

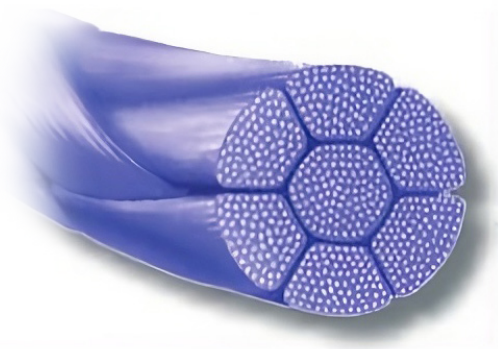

Emballage hermétique
Étanchéité et stérilité du produit garanties

TYPE	Multifilament tressé et enduit
COMPOSITION	Acide polyglycolique
REVÊTEMENT	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
COULEUR	Violet
RÉACTION TISSULAIRE	Minimale
ABSORPTION	L'action hydrolytique qui décompose le matériau entraîne une absorption totale en 60 à 90 jours. Environ 50 % de la résistance à la traction subsiste après 21 jours.
PRÉSENTATION	Boîte de 12 sutures

Veuillez consulter la notice d'utilisation jointe à chaque emballage pour obtenir les instructions complètes, les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site:
MEGADENTAL.FR

La suture synthétique résorbable tressée PGA RAPID (ACIDE POLYGLYCOLIQUE) est une suture chirurgicale stérile, synthétique et résorbable, composée d'acide polyglycolique. Elle est enrobée d'un mélange de polycaprolactone et de stéarate de calcium. Elle est tressée et disponible sous forme non teintée. La perte progressive de résistance à la traction et de masse, ainsi que l'absorption finale des sutures, se produisent par hydrolyse. La perte de résistance à la traction effective est d'environ 50 % 7 jours après l'implantation. L'absorption est complète après environ 42 jours.

Haute résistance à la traction: Excellent soutien des tissus.

Synthétique: Réaction tissulaire minimale.

Se décompose par hydrolyse: Taux d'absorption prévisible, absorption rapide de la masse.

Structure tressée: Excellentes propriétés de manipulation. Grande flexibilité. Haute résistance à la traction. Excellente tenue des noeuds.

Multifilament enduit: Passage en douceur à travers les tissus avec un minimum de frottement, de résistance tissulaire et de traumatisme. Bonne fixation et ajustabilité des noeuds. Capillarité réduite.



Emballage hermétique

Étanchéité et stérilité du produit garanties

TYPE	Multifilament tressé et enrobé
COMPOSITION	Acide polyglycolique
REVÊTEMENT	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
COULEUR	Non teint
RÉACTION TISSULAIRE	Minimale
ABSORPTION	L'action hydrolytique qui décompose le matériau entraîne une absorption totale en environ 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction subsiste après 7 jours.
PRÉSENTATION	Boîte de 12 sutures

Veillez vous reporter aux notices d'utilisation figurant sur chaque emballage pour obtenir les instructions, indications, contre-indications, mises en garde et précautions complètes

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site:
MEGADENTAL.FR

Soie (Tressé)


SUTURE NON RESORBABLE TRESSÉE EN SOIE est un fil de suture chirurgical naturel, non résorbable et tressé, extrait du cocon du ver à soie (filature). La soie destinée à la fabrication de fils tressés est traitée pour éliminer les cires et gommes naturelles. Enduite de silicone. Teintée en noir.

Haute résistance initiale à la traction, non résorbable:

Bon soutien tissulaire prolongé jusqu'à 3 mois.

Structure tressée: Excellentes propriétés de manipulation. Grande flexibilité. Résistance élevée à la traction. Excellente tenue des noeuds.

Multifilament enduit: Passage en douceur à travers les tissus avec un minimum de frottement, de résistance tissulaire et de traumatisme. Bonne fixation et ajustabilité des noeuds. Réduction de l'action capillaire.

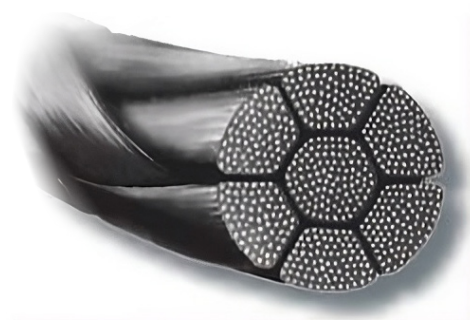

Conditionnement hermétique

Étanchéité et stérilité du produit garanties

TYPE	Multifilament tressé
COMPOSITION	Fibres tressées issues du cocon du ver à soie
REVÊTEMENT	Silicone
COULEUR	Noir
RÉACTION TISSULAIRE	Modérée
ABSORPTION	La suture en soie provoque une réaction inflammatoire initiale dans les tissus, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par des tissus conjonctifs fibreux.
PRÉSENTATION	Boîte de 12 sutures

Veuillez consulter les notices d'utilisation figurant sur chaque emballage pour connaître l'ensemble des instructions, indications, contre-indications, mises en garde et précautions

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site:
MEGADENTAL.FR

PGA (Acide Polyglycolique) Suture synthétique résorbable tressée

CODE ARTICLE	RÉSORBABLE	COULEUR	CURVATURE DE L'AIGUILLE	LONGUEUR DE L'AIGUILLE	POINTE DE L'AIGUILLE	FORME DE L'AIGUILLE	GÉOMÉTRIE DE LA POINTE	UPS	FIL	LONGUEUR DU FIL	TEMPS
9770449	Résorbable	Violet	3/8 Cercle	19mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	70cm	21 jours / 56 - 70 jours
9770450	Résorbable	Violet	3/8 Cercle	18mm	Coupe inversée	Triangulaire		4-0	Tressé	70cm	21 jours / 56 - 70 jours
9770451	Résorbable	Violet	3/8 Cercle	24mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	70cm	21 jours / 56 - 70 jours
9770452	Résorbable	Violet	1/2 Cercle	18mm	Pointe effilée	Ronde		4-0	Tressé	45cm	21 jours / 56 - 70 jours

PGA Rapid (Acide Polyglycolique) Suture synthétique résorbable tressée

CODE ARTICLE	RÉSORBABLE	COULEUR	CURVATURE DE L'AIGUILLE	LONGUEUR DE L'AIGUILLE	POINTE DE L'AIGUILLE	FORME DE L'AIGUILLE	GÉOMÉTRIE DE LA POINTE	UPS	FIL	LONGUEUR DU FIL	TEMPS
9770462	Rapide résorbable	Non teint	3/8 Cercle	18mm	Coupe inversée	Triangulaire		4-0	Tressé	45cm	7 jours / 42 jours
9770463	Rapide résorbable	Non teint	3/8 Cercle	18mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	45cm	7 jours / 42 jours

Soie Suture tressée non résorbable

CODE ARTICLE	RÉSORBABLE	COULEUR	CURVATURE DE L'AIGUILLE	LONGUEUR DE L'AIGUILLE	POINTE DE L'AIGUILLE	FORME DE L'AIGUILLE	GÉOMÉTRIE DE LA POINTE	UPS	FIL	LONGUEUR DU FIL	TEMPS
9770453	Non résorbable	Noir	3/8 Cercle	18mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770454	Non résorbable	Noir	3/8 Cercle	18mm	Coupe inversée	Triangulaire		4-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770455	Non résorbable	Noir	3/8 Cercle	16mm	Coupe inversée	Triangulaire		4-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770456	Non résorbable	Noir	3/8 Cercle	24mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770457	Non résorbable	Noir	1/2 Cercle	15mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770458	Non résorbable	Noir	3/8 Cercle	16mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770459	Non résorbable	Noir	1/2 Cercle	20mm	Coupe inversée	Triangulaire		4-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770460	Non résorbable	Noir	1/2 Cercle	23mm	Coupe inversée	Triangulaire		3-0	Tressé	45cm	Non résorbable
9770461	Non résorbable	Noir	1/2 Cercle	22mm	Pointe effilée	Ronde		3-0	Tressé	45cm	Non résorbable